





**FOB test** obj. číslo **010L410**  
pro časnou diagnózu rakoviny tlustého střeva  
(protilátky proti hemoglobinu)

Gastrointestinální problémy, jako rakovina tlustého střeva, vředy, polypy, kolitidy, divertikulitidy a fisury nemusí vykazovat v časných stádiích žádné viditelné příznaky, pouze okultní krvácení.

**ulti med FOB Test** je rychlý test pro kvalitativní detekci nízké úrovně fekální okultní krve. Test využívá sendvičové metody se dvěma specifickými protilátkami k detekci fekální okultní krve v vzorku. Citlivost testu je vysoká, detekuje už od 80 ng/ml hemoglobinu, nebo 8 µg/g stolice. Přesnost testu není ovlivněna stravou pacienta. Test je specifický pro lidský hemoglobin. Správnost stanovení byla ve více než 99%.

**Postup při odběru vzorku.**

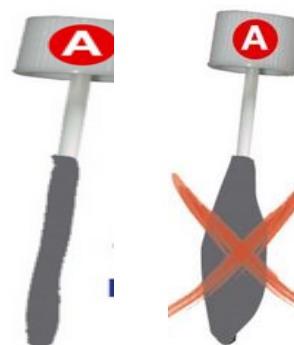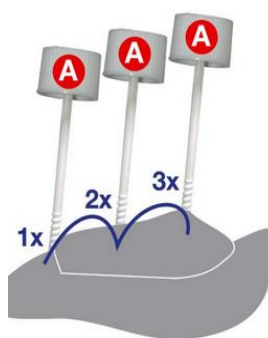

správně

příliš mnoho

Skladování vzorku : 14 dní při pokojové teplotě, nebo jeden měsíc při teplotě 4 -8°C.

Skladování soupravy : při 4 – 30°C.

Doba expirace testu : až 15 měsíců.

Balení : po 20 testech.

Ucelený sortiment nabízených výrobků včetně návodů najdete na [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz).