

NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test

Rychlý test na detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích nasofaryngeálních a orofaryngeálních stěrů.

Katalogové číslo : 243103N-20

Zatímco rychlý test na protilátky NADAL® COVID-19 IgG / IgM * detekuje virus nepřímo, **NADAL® COVID-19 Antigen Rapid Test** detekuje virus přímo zjištěním přítomnosti konkrétního proteinu viru SARS-CoV-2.

Detekce antigenu vyplňuje mezeru v doposud nabízené diagnostice. Nukleokapsidový protein (N) je ideální pro detekci virů, protože je velmi hojný ve virech a dostatečně specifický pro SARS-CoV-2. Je to jeden ze 4 nejdůležitějších strukturálních proteinů a podílí se na replikaci, transkripci a obalení virového genomu.




NADAL® COVID-19 Antigen Rapid Test je rychlý imunotest s laterálním tokem pro kvalitativní detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích nasofaryngeálních a orofaryngeálních stěrů.

Tento test slouží jako pomůcka při diagnostice infekcí SARS-CoV-2. Vezměte na vědomí, že koncentrace antigenu virového nukleoproteinu se mohou v průběhu onemocnění lišit a mohou spadnout pod detekční limit testu. Možnou infekčnost na základě negativních výsledků testů tedy nelze vyloučit.

Jednoduchý postup, výsledek do 15 minut.


Jasně výhody

- V Vysoká specifita
- V Vysoká citlivost při vysoké virové zátěži
- V Snadné použití
- V Rychlé a spolehlivé výsledky testů za pouhých 15 minut
- V Testování lze provést s nasofaryngeálními vzorky
- V Lze skladovat při pokojové teplotě
- V Souprava obsahuje všechny potřebné komponenty včetně sterilních tamponů
- V Žádná zkřížená reaktivita s lidskými patogenními koronaviry (jako hCoV-229E, -HKU1, -NL63 a -OC43) nebo s viry chřipky (jako chřipka A / B)

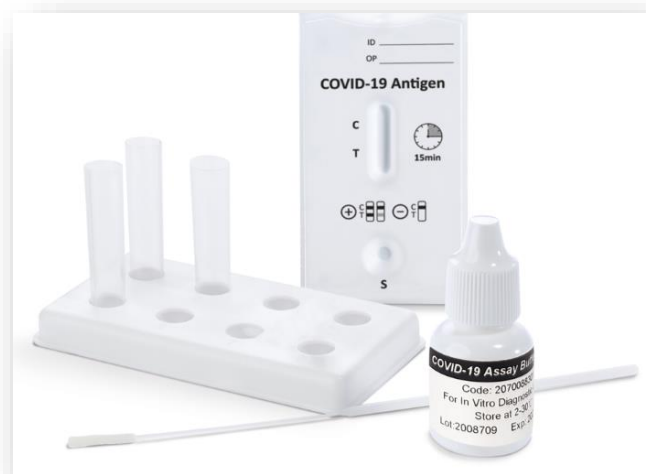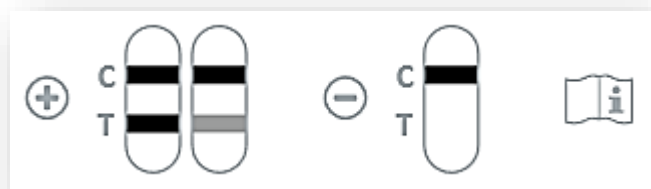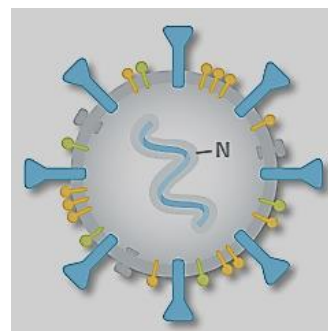

Podrobnější informace naleznete v návodu.

Identifikace pacientů s vysokou virovou zátěží -
podobná citlivost na PCR při hodnotách $C_t \leq 30$

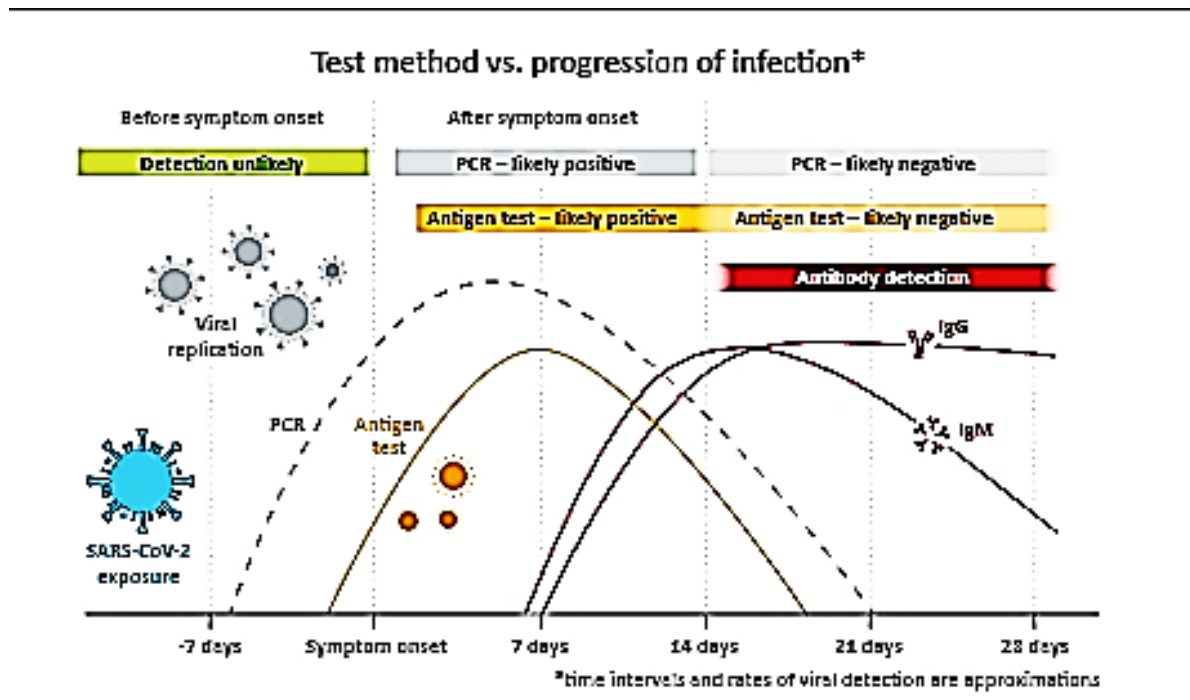

NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test

Rychlý test pro detekci SARS-CoV-2 antigenů virových nukleoproteinů v lidských nasofaryngeálních a oropharyngeálních stěrech.

Produkt	Certifikace	Vzorek	Senzitivita	Specifická	Katalogové číslo	Balení
NADAL® COVID-19 Ag Testovací kazeta	CE	Naso- a oro faryngeální výtěr	97.56 % (C_t rozpětí 20-30)	> 99.9 %	243103N-20	20 testů v balení

Dodávaný materiál: testovací kazety, sterilní tampony, extrakční zkumavky vč. víčka s kapátkem, držák činidla, lahvička s pufrem, příbalový leták.

Cena na vyžiadanie.



Sídlo spoločnosti :

JK-Trading s.r.o,
Dlhá 43, 900 31, Stupava
tel.: + 421 264 774 591

Objednávky :

Písomný kontakt:
JK-Trading s.r.o.
P.O.BOX 053, Pošta 49
841 07 Bratislava

email: jk-trading@jk-trading.sk